

医療用・介護用吸水ラミシート

Powered by

KINSEI

～ Since 1917～

マルチラミシート



天然原料由来の
再生繊維
レーヨン100%
不織布

保湿


消臭

抗菌

抗ウイルス

ソフト

レーヨン
100%

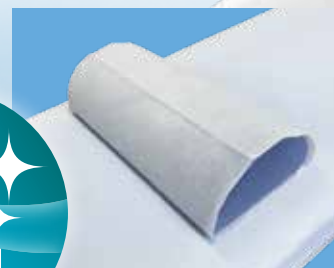

規 格

商品名	形状	サイズ	吸水量 (g/m ²)
マルチラミシート	折りたたみ タイプ	100cm × 120cm	185g/m ²
		100cm × 180cm	
マルチラミシート R	ロール タイプ	30cm × 37cm ミシン目ロール 120枚セット	
		80cm × 50 m	
		100cm × 50 m	

医療用・介護用吸水ラミシート マルチラミシート



消臭


試験データ



アンモニア臭・汗臭の原因物質を減少させる効果あり。


アンモニア濃度 (2時間後)

減少率=70%以上で合格(検知管法)

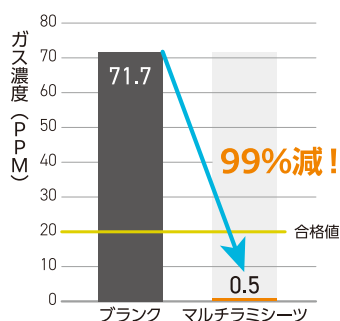


酢酸濃度 (2時間後)

減少率=70%以上で合格(検知管法)

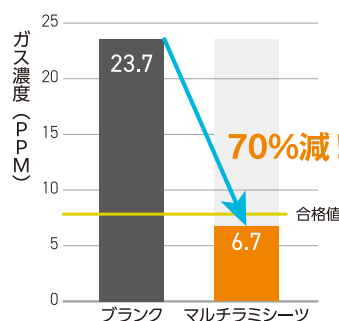

イソ吉草酸濃度 (2時間後)

減少率=A85%以上で合格(ガスクロマトグラフ法)

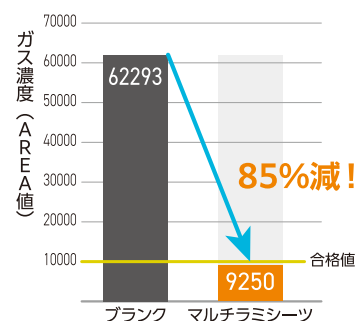

■測定法:SEKマーク繊維製品認証に基づく方法 ■試料:アンモニア酢酸100cm²・イソ吉草酸50cm² 規定量の臭気強度2.0ガスを充てん

抗ウイルス


試験データ



菌だけでなくインフルエンザウイルスにも効果を確認

ウイルス感染価比較 (対数値)

試料	ウイルス感染価 (PFU/vial) 常用対数平均値		抗ウイルス活性値 (Mv) (合格基準値:≧3.0)
	接種直後	2時間作用後	
標準布		6.25	
マルチラミシート		2.30	4.4

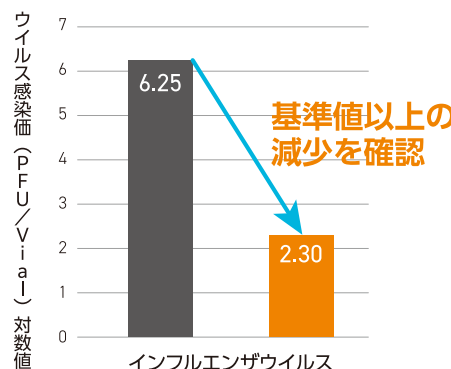

■試験法:JISL1922繊維製品の抗ウイルス性試験方法(ISO18184) ■試験ウイルス株:ATCCVR-1679 ■宿主細胞:MDCK細胞


抗菌

試験データ



院内感染の原因とされる菌に効果あり。

抗菌活性効果値比較

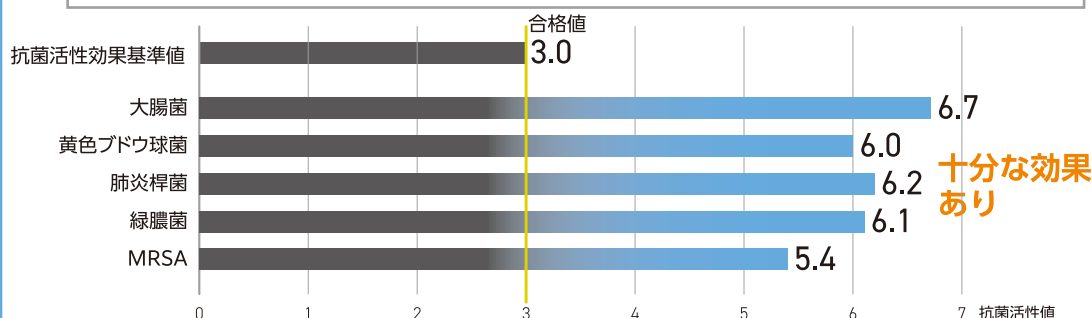

■測定法:JISL1902繊維製品の抗菌性試験・定量試験(菌液吸収法)
■大腸菌株:Escherichia coliNBRC3080 ■黄色ブドウ球菌:Staphylococcus aureusNBRC12732
■緑膿菌:Pseudomonas aeruginosaNBRC3080 ■肺炎桿菌:Klebsiella pneumoniaeNBRC13277

■測定機関:大和化学工業評価技術センター

ご使用上の注意

- 消臭・抗菌・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。
- すべての菌やウイルスに対しての効果を保証するものではありません。
- 肌に合わないと感じた場合は速やかにご使用をお控えください。
- 各データは測定値であり、保証値ではありません。

お問い合わせ先

製造元 **金星製紙株式会社**

本社 〒780-0921 高知県高知市井口町63番地

☎ **088-822-8105**

<http://www.kinseiseishi.co.jp>

